

RESMED

H5i™

HEATED HUMIDIFIER



Welcome Guide


Türkçe

S9™ Series
More. Comfort.

S9[™] | Series
More. Comfort.

Hoş geldiniz

H5i'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihazı çalıştırmadan önce lütfen tüm Hoş Geldiniz ve Bilgi Kılavuzları'nı okuyunuz.

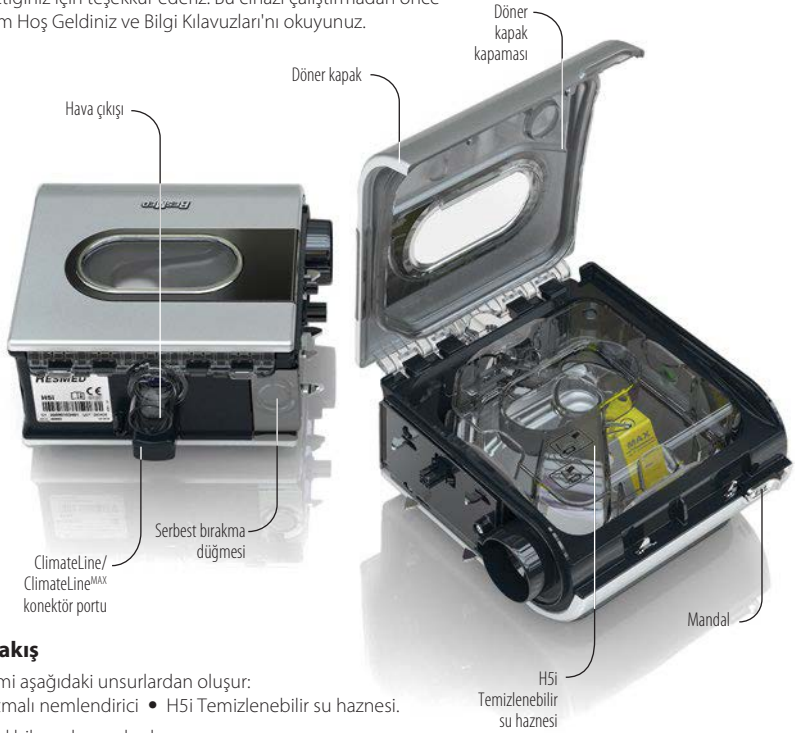

H5i'a bakış

H5i sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

- H5i ısıtılmış nemlendirici
- H5i Temizlenebilir su haznesi.

Opsiyonel bileşenler şunlardır:

- ClimateLine ısıtılmış tüp
- ClimateLine^{MAX} ısıtılmış tüp
- H5i su haznesi.

Seyahat tavsiyeleri

H5i ile hareket veya seyahat ederken:

- Su haznesinin boş olduğundan emin olun.
- H5i'yi serbest bırakma düğmesini kullanarak S9'dan sökünüz.



Kurulum

1. H5i'nizi S9'unuz ile birleştirin ve yerlerine oturana kadar birbirlerine doğru itin.
2. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu S9'un arkasına bağlayın.
3. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
4. Güç kablosunun diğer ucunu prize takın.
5. Hava tüpünün bir ucunu sıkıca hava çıkışına bağlayın.
6. Monte edilmiş maske sistemini hava tüpünün serbest ucuna bağlayın.

Notlar:

- Yeterli havalandırmanın sağlanması için güç kaynağı ünitesini H5i'den uzağa yerleştirin.
- Maskenizin montajı hakkında daha fazla bilgi için maske kılavuzuna bakın.
- Tavsiye edilen maskeler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Ürün Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir.

Su haznesinin doldurulması

1. Mandalı kaydırın ve döner kapağı kaldırarak açın.
2. Su haznesini çıkarın.
3. Su haznesini (ortadaki delikten) maksimum su seviyesi işaretine (380ml) kadar doldurun.
4. Su haznesini H5'i'ye geri takın.
5. Yerine oturduğundan emin olarak döner kapağı kapatın.




LCD ekran

Ana menü

Başlat/Durdur düğmesi

Tedaviyi başlatır veya durdurur.

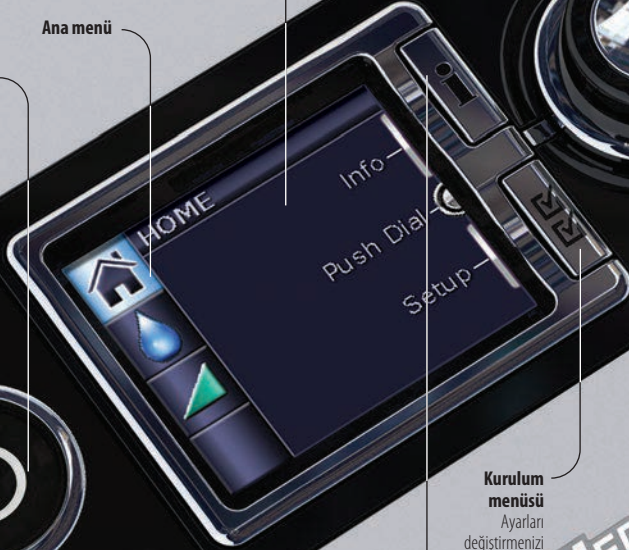

Kurulum menüsü

Ayarları değiştirmenizi sağlar.

Bilgi menüsü

Uyku istatistiklerinizi görüntülemenizi sağlar.

Tuş:

Anasayfa



Nemlilik Düzeyi



Yükselme



Isıtılmış tüp



Climate Control



Başlat/Durdur



Dial tuşu



Kurulum menüsü



Bilgi menüsü



RESMED

Dial tuşu

Dial tuşunun çevrilmesi menüde gezinmenizi ve ayarları değiştirmenizi sağlar. Dial tuşuna basılması bir menüye girmenizi ve seçiminizi onaylamamanızı sağlar.





S9'un temel özellikleri

S9 cihazınızın kontrol paneli bir LCD ekran ile birlikte bir Başlat/Durdur düğmesi, Dial tuşu ile Bilgi ve Kurulum menü tuşlarını içerir.

Nemlilik seviyesinin ayarlanması




Sizin için en rahat ayarı bulmak için OFF (KAPALI)'dan 6'ya kadar olan nemlilik seviyesini herhangi bir anda ayarlayabilirsiniz. Nemlilik seviyenizi ayarlamak için:



1. BAŞLANGIÇ ekranınızdan,  düğmesini NEMLİLİK SEVİYESİ ekranı olarak gösterilene kadar çevirin.
2.  düğmesine basın. Bu seçim turuncu renkle belirtilecektir.
3.  düğmesini istediğiniz nemlilik seviyesi gösterilene kadar çevirin.
4. Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.

H5i'nin ısıtılması

Isıtma özelliği, tedaviye başlamadan önce suyu ısıtmak için kullanılır. Isıtmaya başlamak için:



1. Nemlilik seviyesi ikonuna gidin.
2.  düğmesine basın ve üç saniye tutun. Isıtma durum çubuğu gösterilir. Isıtmayı herhangi bir anda  düğmesine en az üç saniye boyunca basarak durdurabilirsiniz. Tedaviye herhangi bir anda  düğmesine basarak başlayabilirsiniz.

Not: Isıtıcı tablanın soğumasına yardımcı olmak için S9 cihazınız, tedavi bitiminden bir saat sonraya kadar hava üflemeğe devam edecektir. Ancak, cihazı herhangi bir anda fişten çekebilir ve ısıtıcı tablanın hava üflemeği olmaksızın soğumasını sağlayabilirsiniz.





Başlarken

1. S9 ve H5'i'nizin bağlı olduğundan ve su haznesinin maksimum su seviyesi işaretine kadar dolu olduğundan emin olun.
2. Gerekirse nemlilik seviyesini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde takın.
4. Tedaviye başlamak için, maskenizin içine nefes alın ve/veya  düğmesine basın.
5. Yatağa uzanın ve hava tüpünü uykunuzda hareket etmeniz de serbest kalacak şekilde ayarlayın.
6. Herhangi bir anda tedaviyi durdurmak için maskenizi çıkarın ve/veya  düğmesine basın.

Notlar:

- Doktorunuz cihazınızda SmartStart özelliğini açtıysa maskenizin içine nefes aldığınızda cihaz otomatik olarak başlayacak ve maskeyi çıkardığınızda otomatik olarak duracaktır.
- Tedavi başladıktan sonra bir tedavi ekranı görüntülenir.

Temizlik ve bakım

Temizlik ve bakımı bu bölümde anlatıldığı şekilde düzenli olarak uygulamalısınız.

H5i'nin sökülmesi

1. Mandalı kaydırın.
2. Döner kapağı kaldırarak açın.
3. Su haznesini çıkarın.
4. Fazla suyu su haznesinden atın.
5. Yanlardaki dört mandalı da açın.
6. Hazne kapağını, tablayı ve tabanı birbirinden ayırın.



Günlük temizlik

1. Sökülmüş olan hazne kapağını, tablayı ve tabanı hafif bir deterjan ile ılık suda yıkayın.
2. Temiz suda iyice durulayın ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde kendiliğinden kurumaya bırakın.

Not: Sökülmüş olan hazne kapağı, tabla ve taban aynı zamanda narin veya cam eşya döngüsü ile (yalnızca üst rafta) bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Aylık temizlik

1. Döner kapağın döner kapak kapamasını sökün ve hafif bir deterjan ile ılık suda yıkayın.
2. H5i'nin dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.

H5i'nin yeniden montajı

1. Tablayı, maksimum su seviyesi işaretinin yukarı baktığından emin olarak tabana yerleştirin.
2. Hazne kapağını, ortadaki deliklerin hizada olduğundan emin olarak tabanın/tableanın üstüne yerleştirin.
3. Dört mandalı da kapatın.
4. Su haznesini doldurun ve H5i'ye geri takın.
5. Yerine oturduğundan emin olarak döner kapağı kapatın.



Bakım kontrol listesi

- ✓ Su haznesi ve döner kapak kapamasını yıpranma ve hasara karşı inceleyin.
- ✓ Herhangi bir bileşen sızdırma yapıyor veya çatlak, bulanık ya da çukurlu ise su haznesini değiştirin.
- ✓ Çatlak veya hasarlı ise döner kapak kapamasını değiştirin.
- ✓ Su haznesindeki beyaz toz kalıntılarını, bir ölçek sirke ve 10 ölçek su ile hazırladığınız solüsyonu kullanarak temizleyin.

S9[™] | Series
More. Comfort.

368882/1 2012-11

H5i

WELCOME

EUR 1/3



Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

H5i is a trademark of ResMed Ltd and is registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2012 ResMed Ltd.

