

RESMED

VPAP™ ST

VPAP™ S

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE



Welcome Guide

Türkçe

Hoş geldiniz

VPAP ST veya VPAP S seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihazı çalıştırmadan önce lütfen tüm Hoş Geldiniz ve Bilgi Kılavuzlarını okuyunuz.




VPAP'a bakış

VPAP sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

- VPAP cihazı
- Hava tüpü
- 90 W güç kaynağı birimi
- S9 seyahat çantası
- SD kart
- S9 SD kart koruyucu kılıf.

İsteğe bağlı bileşenler arasında şunlar vardır:

- H5i ısıtmalı nemlendirici
- Standart hava tüpü
- SlimLine hava tüpü
- 3 m hava tüpü
- ClimateLine ısıtmalı hava tüpü sistemi
- 30 W güç kaynağı ünitesi (H5i desteklemez)
- Power Station II batarya paketi
- DC/DC Dönüştürücü 24 V/90 W.

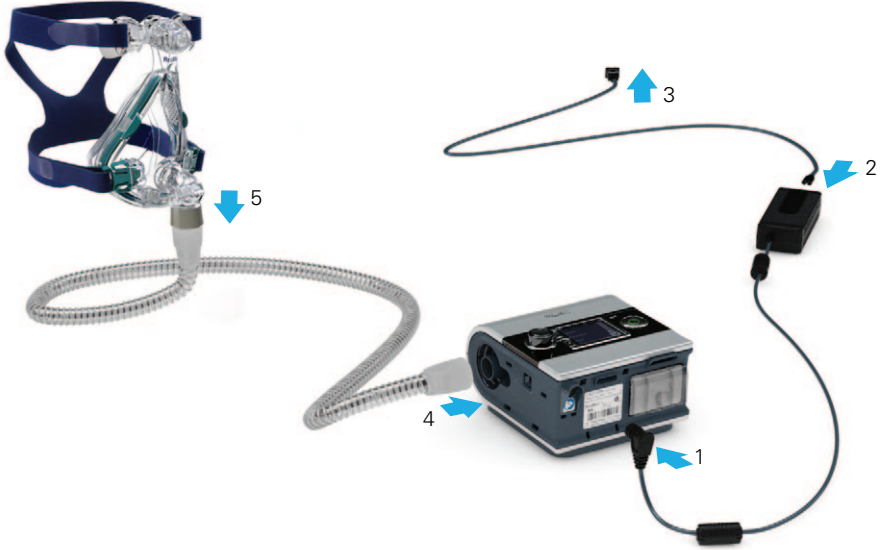

Kurulum

1. Güç kaynağı biriminin DC kablosunu VPAP'un arkasına bağlayın.
2. Güç kablosunu güç kaynağı birimine bağlayın.
3. Güç kablosunun diğer ucunu güç çıkışına takın.
4. Hava tüpü sisteminin bir ucunu hava çıkışına sıkıca takın.
5. Kurulu maske sistemini hava tüpü sisteminin serbest ucuna takın.

Notlar:

- Maskenizin montajı hakkında daha fazla bilgi için maske kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Tavsiye edilen maskeler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir.

VPAP ST

Başlat/Durdur düğmesi
Tedaviyi başlatır veya durdurur.


LCD ekran
Menüler, tedavi ekranları ve hatırlatmaları gösterir.


Bilgi menüsü
Uyku istatistiklerinizi görmeyi veya menüden çıkmanızı mümkün kılar.


Kurulum menüsü
Ayarlarınızda değişiklikler yapmayı veya menüden çıkmanızı mümkün kılar.


Dial tuşu
Dial tuşunun çevrilmesi menüde gezinmeyi ve ayarları değiştirmenizi sağlar. Dial tuşuna basılması bir menüye girmenizi ve seçiminizi onaylamanızı sağlar.

Tuş:


Anasayfa 

Nemlilik Düzeyi 


Yükselme 

Isıtılmış tüp 

Climate Control 

Başlat/Durdur 

Dial tuşu 

Kurulum menüsü 

Bilgi menüsü 




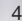
VPAP temel bilgiler

VPAP cihazınızın kontrol paneli bir LCD ekran ile birlikte bir Başlat/Durdur düğmesi, Dial tuşu ile Bilgi ve Kurulum menü tuşlarını içerir.

Rampa süresinin ayarlanması


Tedavi başlangıcını daha rahat kılmak için tasarlanmış olan rampa süresi, basıncın düşük bir başlangıç basıncından tedavi basıncına yükseldiği süredir. Rampa sürenizi ayarlamak için:






1. ANASAYFA ekranınızdan RAMP ekranı mavi görüntüleninceye kadar  kısmını çevirin.
2.  kısmına basın. Seçim turuncu renkle belirtilecektir.
3. İsteğinizi rampa süresi gösterilene kadar  düğmesini çevirin.
4. Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.

Maske oturumunun kullanımı

Maskenizi düzgün oturmaya yardım etmesi için maske oturumunu kullanabilirsiniz. Bu özellik, tedavi başlamadan önce üç dakika süre ile tedavi basıncı verir; bu sürede maske oturumunuzu kontrol edebilir ve sızıntıyı minimuma indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Maskenizi, maske kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde oturtun.
2. Ana ekranınızdan  kısmına basıp üç saniye basılı tutun. Şu MASKE OTURUMU ekranlarından biri görüntülenir:

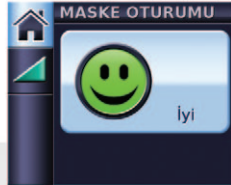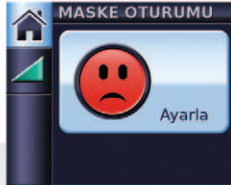


3. Gerekirse maskenizi, maske yastığını ve başlığı iyi bir maske oturumu sağlanana kadar ayarlayın. Üç dakikadan sonra basınç ayarlı basınca döner ve tedavi başlar. Maske oturumunu herhangi bir zamanda  tuşuna basarak sonlandırabilirsiniz.


Maske tipini seçme

Maske tipinizi seçmek için:




1.  kısmına basın. AYARLAR ekranı görüntülenmektedir.




2. Maske mavi olarak görüntüleninceye kadar  kısmını çevirin.




3.  kısmına basın. Seçim turuncu renkle belirtilecektir.




4.  düğmesini size gerekli olan maske ayarı gösterilene kadar çevirin.



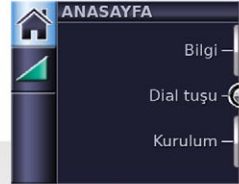

5. Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.

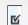

6. ANASAYFA ekranına dönmek için  kısmına basın.



Başlarken

1. Gücün bağlı olduğundan emin olun.
2. Gerekirse yükselme süresini ayarlayın.
3. Maskenizi, maske kullanıcı kılavuzunda belirtildiği şekilde oturtun.
4. Tedaviye başlamak için maske içine nefes vermeniz ve/veya  düğmesine basmanız yeterlidir.
5. Uzanıp hava tüpünü uykunuzda döndüğünüz takdirde serbestçe hareket edebilecek şekilde düzenleyin.
6. Herhangi bir anda tedaviyi durdurmak için maskenizi çıkarın ve/veya  düğmesine basın.

Notlar:

- Doktorunuz SmartStart özelliğini etkinleştirmişse cihazınız, maske içine nefes verdiğinizde otomatik olarak başlayacak ve maskeyi çıkardığınızda otomatik olarak duracaktır.
- Tedavi sırasında güç kesilirse tekrar güç geldiğinde cihaz tedaviyi otomatik olarak tekrar başlatır.

Tedavi ekranlarını görme

Sistemin konfigüre edilme şekline göre tedavi başladıktan sonra şu örnek ekranlardan (ST modunda gösterilmiştir) birini göreceksiniz:



✓ H5i nemlendirici



- ✓ H5i nemlendirici
- ✓ ClimateLine veya ClimateLine^{MAX} ısıtmalı hava tüpü
- ✓ Climate Control – Otomatik



- ✓ H5i nemlendirici
- ✓ ClimateLine veya ClimateLine^{MAX} ısıtmalı hava tüpü
- ✓ Climate Control – Manuel



✓ İsteğe bağlı aksesuarlar olmadan standart VPAP



✓ Oksimetre adaptörüyle oksimetre verileri

S ve ST modlarında basınç çubuğundaki sabit çizgiler ekspiratuar ve inspiratuar basınçlara işaret eder. CPAP modunda sadece ayarlı bir basınç gösterilir. Tedavi rampa yaparken (basınç çubuğu altında turuncu rampa simgesiyle belirtilir) basınç değerleri turuncu görülür. Ayarlı bir basınca ulaşıldığında bu değerler beyaz olarak görüntülenir.

Tedavi ekranı 1 ve 2 arasında geçmek için ANASAYFA ekranınızdan  kısmına basın.



- ✓ Cihaz tetiği (Zamanlı) ve döngülü (Zamanlı, Azam Ti veya Min Ti) nefes göstergeleriyle tedavi
- ✓ Spontan tetik ve döngülü nefeslerle tedavi

Bilgi menüsünün görülmesi

Bilgi menüsünde uyku kaliteniz, uyku raporunuz ve servis bilgisini gösteren bir dizi ekran vardır.

Bilgi menüsünü görmek için ANASAYFA ekranınızdan  kısmına basın.



- ✓ Uyku Kalitesi ekranında son seanstaki kullanım saatlerinizi daima görebilirsiniz ve doktorunuz etkinleştirmişse maske oturma ve AHI verileri görüntülenir.
- ✓ Uyku Raporu kısmında sadece dönem değiştirilebilir—diğer değerler sadece gösterim içindir.
- ✓ Servis bilgisinde cihaz çalışma saatleri, (nemlendirici için ısınma/soğuma sürelerini içerir) ve yazılım tanımlamaları görüntülenir.

ANASAYFA ekranına dönmek için  kısmına basın.

Temizlik ve bakım

Bu cihazların bakımıyla ilgili detaylı talimatlar için maskenizin ve nemlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

Günlük

Kelepçe üzerindeki parmak tokalarını çekerek hava tüpünü çıkarın. Bir sonraki kullanıma kadar temiz, kuru bir yere asın.

Haftalık

1. Hava tüpünü VPAP cihazı ve maskeden çıkarın.
2. Hava tüpünü hafif deterjanla ılık suda yıkayın.
3. İyiye durulayın, asın ve kurumaya bırakın.
4. Sonraki kullanımdan önce hava tüpünü hava çıkışına ve maskeye tekrar bağlayın.

Aylık


1. VPAP'un dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresini hem delikler hem kir veya tozdan dolayı tıkanmalar açısından kontrol edin. Gerekliğinde hava filtresini yenisiyle değiştirin.

Hava filtresinin değiştirilmesi

Hava filtresini altı ayda bir (veya gerekirse daha sık) değiştirin.

1. Hava filtresi kapağını VPAP cihazının arkasından çıkarın.
2. Eski hava filtresini çıkarın ve atın.
3. Yeni bir ResMed hava filtresini, filtre kapağı üzerinde düz olarak oturduğundan emin olarak takın.
4. Hava filtresi kapağını tekrar takın.

Hava filtresi kapağı

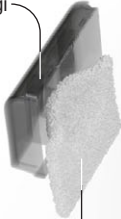

Hava filtresi




SD kartı

VPAP cihazınızdan tedavi verilerini toplamak ve doktorunuzdan ayar güncellemeleri temin etmek için bir SD kart tedarik edilmiştir. Yönlendirildiğiniz takdirde VPAP cihazınızı fişten çekin, SD kartınızı çıkarın, koruyucu kılıfa koyun ve doktorunuza gönderin.

Kartın çıkarılması

1. Serbest bırakmak için SD kartı içeri itin.
2. Kartı çıkarın.
3. Kartı koruyucu kılıfın içine koyun.
4. Yönlendirildiği şekilde koruyucu kılıfı doktorunuza geri gönderin.

Kartınızın çıkarılması ve takılması ile ilgili daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte tedarik edilen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı'na bakınız. Lütfen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfı ilerde kullanmak için saklayın.

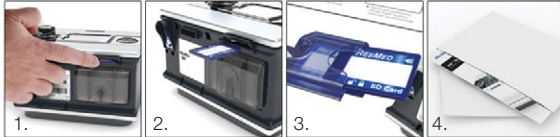

Notlar:

- Sorun giderme bilgisi için Bilgi Kılavuzu'na bakın.
- Daha fazla ürün bilgisi için www.resmed.com sitesine bakın.

368698/1 2012-02
S9 VPAP ST / S9 VPAP S

WELCOME
EUR1



Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. **Distributed by:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9 VPAP, H5i, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are trademarks of ResMed Ltd and S9, ClimateLine, SmartStart and VPAP are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2012 ResMed Ltd.

CE
0123